


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННОЧКА
MFS-700

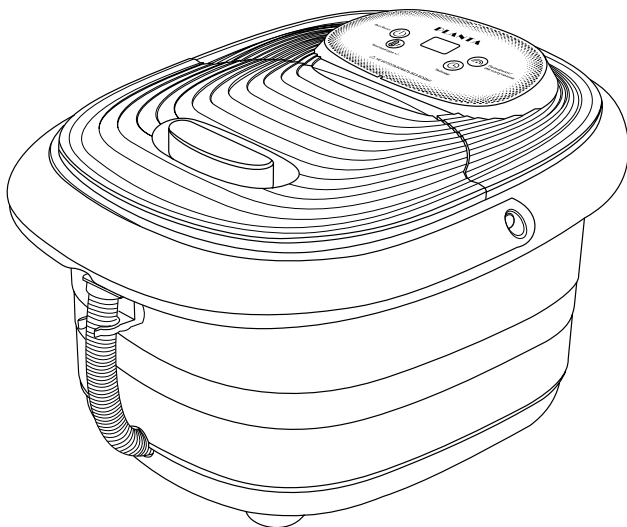

Узнайте больше:
инструкция, гарантия, видео*



* Сканируйте QR-код для подробной информации о вашем товаре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукции PLANTA!

С **гидромассажной ванночкой PLANTA MFS-700** Вы сможете наслаждаться спа-процедурой ухода за ногами в любое удобное для Вас время прямо у себя дома. Процедуры с использованием гидромассажной ванночки с массажными роликами оказывают расслабляющее и стимулирующее действие, снимают напряжение и тяжесть в ногах, помогают избавиться от усталости.

Гидромассажная ванночка MFS-700 имеет 8 массажных роликов, таймер с возможностью установки времени процедуры, а также функцию регулировки нагрева воды в диапазоне от 35 до 48 °С. Пузырьковый массаж имитирует джакузи, благоприятное воздействие которого на организм неоспоримо, а подогрев усиливает положительный эффект гидромассажа и делает процедуру еще более приятной и расслабляющей.

 **Внимание! Гидромассажная ванночка не является товаром медицинского назначения!**

Если Вы не уверены, что ванночка Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Устройство предназначено для личного использования.

Чтобы использовать все преимущества Вашей гидромассажной ванночки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего устройства.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: <https://planta-russia.ru>



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Если из прибора произошла утечка, он больше непригоден для использования.
- Обязательно вымойте ноги перед использованием устройства. Оставшиеся на ногах грязь или шерсть животных могут привести к засорению роликов и отверстий подачи пузырьков.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев, быть мокрым или влажным. Располагайте кабель так, чтобы он не мог быть поврежден или раздавлен.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Категорически запрещено использовать устройство без воды.
- Не используйте прибор во время сна, управления другим оборудованием, а также под воздействием алкоголя или других веществ.

- Не наливайте горячую воду температурой выше 45°C в чашу, чтобы не обжечь ноги, повредить или деформировать изделие.
- Не используйте устройство дольше 60 минут. Ванночка не предназначена для длительного непрерывного использования. Дайте устройству достаточно остыть перед повторным использованием.
- Не используйте пенообразующие средства, они могут повредить устройство. Соответствующие средства для ванночек для ног доступны у специализированных производителей.
- При использовании ванночки следите, чтобы устройство располагалось на сухой поверхности и вода не проникала в отсеки устройства, кроме чаши для гидромассажа. Не используйте данное устройство в ванной, душе, бассейне и не погружайте в воду.
- Нельзя оставлять работающее устройство, накрытое одеялами, тканями и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Не кладите тяжелые предметы в чашу, не вставайте на ноги и не прыгайте в ванночке. Устройство можно использовать только сидя.
- Не осуществляйте нажатие кнопок на панели устройства и не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой и заполнением устройства водой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в устройство.
- Храните устройство в надежном месте.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.



Внимание! Категорически запрещено лить воду на панель, использовать устройство без воды и использовать его стоя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется использовать прибор, если Вы:

- беременны или у Вас менструация;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- имеете различные патологии в острой фазе;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, вирусное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
- проходите реабилитацию после операции;
- имеете заболевания кожи;
- страдаете от острой или хронической респираторной недостаточности;
- страдаете от сердечной недостаточности.

Запрещено использовать прибор тем людям, у которых имеются:

- расстройства чувствительности кожи (например, пониженный болевой порог), любые кожные заболевания и воспаления, аллергические реакции на коже, а также открытые раны, ушибы и послеоперационные рубцы в процессе заживления;
- нарушения сердечно-сосудистой деятельности, инфаркт, инсульт;
- опухоли, онкология, воспаления внутренних органов и тканей;
- инфекционные заболевания, сепсис, повышенная температура тела;
- гипертонические и другие сосудистые заболевания;
- заболевания желудочно-кишечного тракта, камни в желчном пузыре или почках;
- нарушения свертываемости крови, любые заболевания вен и лимфоузлов, тромбофлебит и склонность к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям;
- кардиостимулятор, инсулиновая помпа, имплантаты, протезы, штифты или спираль;

- болезни, протекающие с приступами (например, эпилепсия);
- диабет.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- В устройстве имеются функции подогрева. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут, и использовать устройство можно только под наблюдением. Лица, не достигшие совершеннолетия, также должны находиться под присмотром во время использования устройства.
- Если в зоне массажа имеются украшения или металлические предметы, то перед использованием прибора их необходимо снять во избежание получения травм.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, гидромассаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызывать бессонницу.
- В зависимости от температуры воды рекомендованное время продолжительности процедуры гидромассажа составляет:

35 °С – 37 °С	25 минут
38 °С – 41 °С	15 минут
41 °С – 48 °С	10 минут

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не принимайте ванночку для ног в течение 30 минут до или после еды.
- Принимая ванночку для ног, выпивайте 1–2 стакана воды.
- Продолжительность каждой ванночки должна составлять не более 60 минут.

Примечание! Устройство было протестировано перед отправкой с завода, поэтому появление пятен от воды в чаше является естественным явлением.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Использование гидромассажных ванн для ног способствует снятию усталости и напряжения в мышцах, расслабляет и тонизирует стопы, уменьшая отечность и облегчая симптомы, связанные с длительным нахождением на ногах. Теплые водные процедуры для ног в сочетании с массажем улучшают самочувствие, способствуют снижению стресса и улучшению настроения.

Антибактериальное инфракрасное излучение:

- Инфракрасное излучение проникает в глубокие слои кожи, усиливая кровообращение и способствуя снятию усталости. Благодаря своим антибактериальным свойствам, излучение снижает количество патогенных микроорганизмов на коже, что особенно полезно для профилактики инфекций и неприятных запахов. Принятие ванн с инфракрасным излучением способствует заживлению мелких ранок и трещин, активируя процесс регенерации кожи.

Массажные функции:


- Встроенные массажные системы, такие как механические массажные ролики и пузырьковый массаж, обеспечивают мягкое воздействие на стопы, способствуя расслаблению и улучшая кровообращение.

Поддержка здоровья кожи:

- Использование гидромассажной ванночки способствует смягчению кожи, помогает в борьбе с сухостью и трещинами, а также предотвращает образование мозолей.


Расслабление:

- Регулярные процедуры с гидромассажем способствуют снижению стресса, напряжения и усталости, улучшая общее самочувствие и настроение.

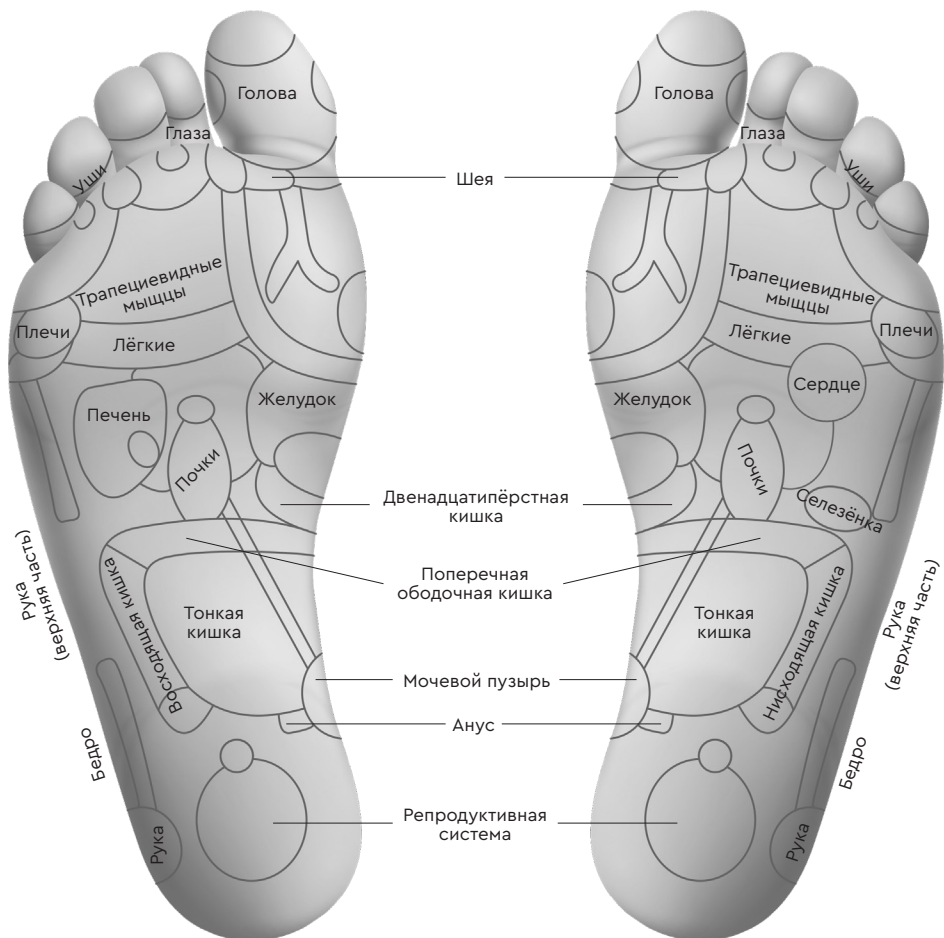

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Комплектация:

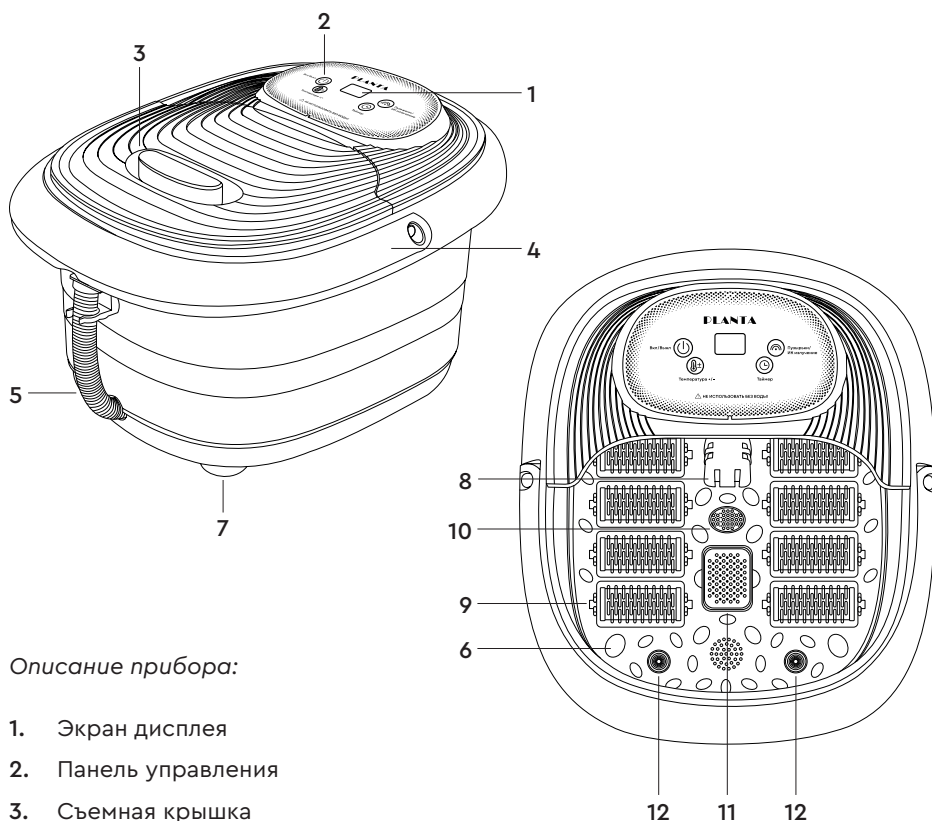


Описание прибора:


1. Экран дисплея
2. Панель управления
3. Съемная крышка
4. Ручка для переноски массажера
5. Трубка для слива воды
6. Рельефная массажная поверхность
7. Противоскользящие ножки – 4 шт.
8. Нагревательный элемент
9. Механические массажные ролики – 8 шт.
10. Гидромассажная форсунка
11. Контейнер для соли и трав
12. Встроенные инфракрасные излучатели – 2 шт.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

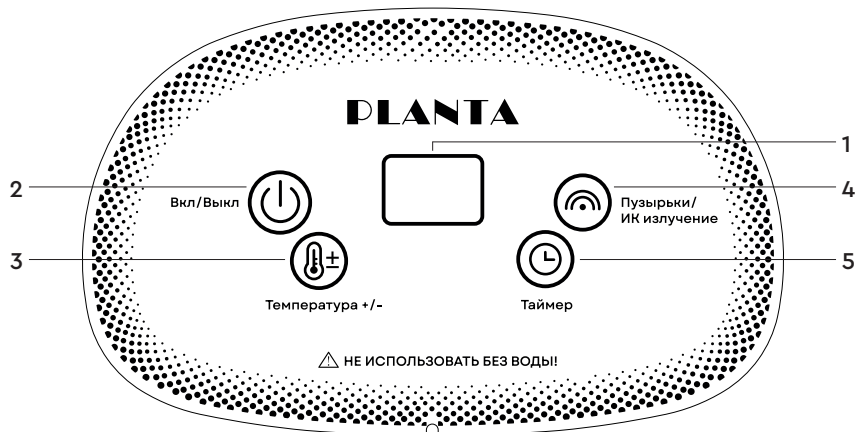


1. Экран дисплея, отображающий температурный режим и активированное время работы устройства
2. Кнопка включения/выключения устройства
3. Кнопка увеличения и уменьшения температуры нагрева воды
4. Кнопка активации пузырькового массажа ног и инфракрасного (ИК) излучения
5. Кнопка установки времени процедуры массажа

1.  **Кнопка включения/выключения устройства**
 - Гидромассажная ванночка активирует свою работу при нажатии кнопки на панели управления.
 - При включении устройства автоматически активируются функции пузырькового массажа ног и инфракрасного излучения.
 - Для выключения гидромассажной ванночки нажмите кнопку на панели управления.

2.  **Кнопка увеличения и уменьшения температуры нагрева воды** в диапазоне от 35°C до 48°C с шагом в 1 градус.

3.  **Кнопка активации пузырькового массажа ног и инфракрасного (ИК) излучения**
 - При включении устройства автоматически активируются функции пузырькового массажа ног и инфракрасного излучения.
 - Нажмите на кнопку один раз для отключения пузырькового массажа ног и инфракрасного излучения. Нажмите повторно для их активации. Подогрев воды при этом будет оставаться активным.

4.  **Кнопка установки времени процедуры массажа** в диапазоне от 60 до 10 минут с шагом в 10 минут.
 - При установке времени массажа электронный дисплей будет отображать активированное время работы массажера.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Используйте прибор только в положении сидя. Запрещается вставать на прибор!
- Прибор нельзя использовать без воды! Обязательно налейте воду перед включением устройства.

⚠ Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

1. Извлеките из коробки устройство. Удалите все упаковочные материалы.
2. Внимательно осмотрите ванночку на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
3. Перед использованием снимите крышку устройства и налейте в чашу воду (рекомендуется добавлять теплую воду не более 45°C) до соответствующего уровня воды так, чтобы покрыть нагревательный элемент.

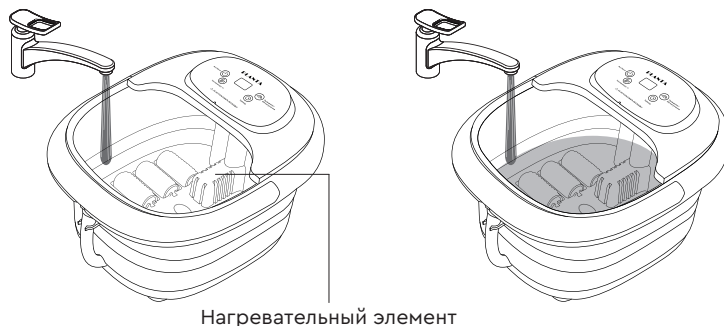

ПРИМЕЧАНИЕ! Рекомендуется наливать в ванночку теплую воду, однако Вы также можете налить воду холоднее. Общее время нагрева теплой воды – 10-15 мин, при добавлении в ванночку холодной воды время нагрева увеличится.

4. **ВКЛЮЧЕНИЕ.** Подключите устройство к розетке, на экране дисплея высветится «OF». Далее нажмите на кнопку  на панели управления.
5. При включении устройства активируются функции пузырькового массажа ног и инфракрасного излучения. На дисплее автоматически отобразится предустановленное значение температуры в 42°C, через несколько секунд отобразится текущая температура нагрева воды.


Примечание! Базовая функция нагрева предусматривает достижение температуры воды до 42°C в случае отсутствия действий пользователем по регулировке температуры после включения.


6. С помощью кнопки  установите необходимое время массажа в диапазоне от 60 до 10 минут с шагом в 10 минут. Нажмите 1 раз для установки времени массажа в 60 минут, 2 раза для установки времени массажа в 50 минут, 3 раза для 40 минут, 4 раза для 30 минут и т.д.
7. С помощью кнопки  установите комфортный уровень нагрева воды в диапазоне от 35°C до 48°C с шагом в 1 градус. Вода нагреется в течение 10–15 минут. Нажимайте данную кнопку, чтобы повысить и понизить температуру воды. Для увеличения температуры нажимайте кнопку необходимое количество раз, пока не достигните желаемой температуры. Для уменьшения температуры воды необходимо повысить её до 48°C, после чего следующим нажатием понизить температуру до 35°C и нажимать необходимое количество раз для выставления оптимальной для Вас температуры.


ПРИМЕЧАНИЕ! Т.к. на температуру воды в том числе оказывает влияние внешняя среда, прибор может нагревать воду на 2–3 °С больше выбранного значения. Диапазон колебаний 2–3 °С от установленного значения является нормальным и допустимым и не говорит о неисправности прибора.


8. Для улучшения эффекта в ванночку для ног можно добавлять различные средства в зависимости от желаемого эффекта. Это могут быть эфирные масла, травы, гранулы, соль для ванны и иные ингредиенты. Средства, содержащие гранулы, или подобные им средства необходимо поместить в контейнер для соли и трав **ДО** добавления воды в чашу устройства. Чтобы добавить ингредиенты в чашу, необходимо открыть крышку контейнера, положить внутрь контейнера необходимые Вам средства и закрыть крышку. Обратите внимание, чтобы остатки использованных Вами средств не попали в чашу.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте пенообразующие средства. Данные вещества могут повредить прибор.

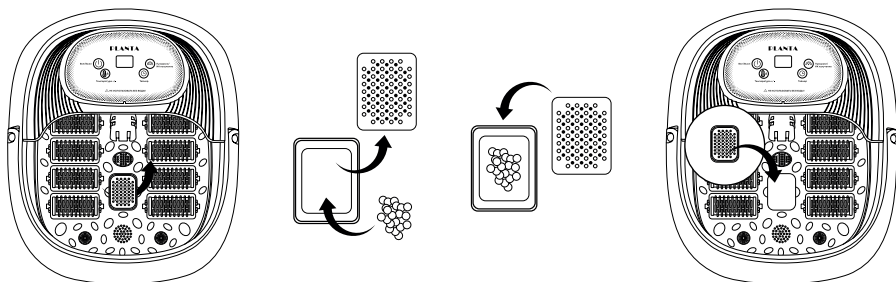

9. По желанию Вы можете выключить функцию пузырькового массажа и инфракрасного излучения. Нажмите на кнопку  один раз для их отключения. Нажмите повторно для активации.

10. **ОТКЛЮЧЕНИЕ.** Сухими руками выключите прибор после использования, нажав на кнопку  на панели управления, выньте вилку из розетки и слейте воду через трубку для слива воды, аккуратно открыв её.

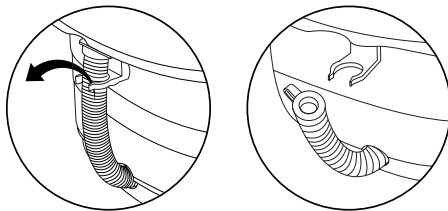

ВАЖНО! Не принимайте ванночку для ног, если у Вас возникла аллергия на принимаемые лекарства или Ваш врач полагает, что применение ванночки Вам противопоказано. Некоторые лекарственные препараты могут вызывать образование волдырей или локальное покраснение и зуд кожи. При таких побочных явлениях не следует принимать ванночку для ног.

ВНИМАНИЕ! При использовании массажера будьте аккуратны и не ставьте ноги на края ванночки во время работы устройства!

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на массажер.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 15 минут. Полезное действие массажа составляет 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя или специалисты авторизованных сервисов.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Если Вы не используете устройство, храните его в сухом месте.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Не используйте прибор без воды.
- Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.
- Чистите корпус прибора только сухой тканью. Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен. При появлении засаленных участков на панели управления протрите его слегка влажной мягкой тканью и вытрите насухо. Не используйте химические или абразивные средства для чистки и ухода за прибором.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Устройство не подключено в сеть	Убедитесь, что устройство включено в сеть
На экране дисплея отображается «ЕЕ»	Слишком высокая температуры воды в приборе	Уменьшите температуру воды в приборе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **MFS-700**

Размеры массажера: 39 x 45 x 29 см

Питание: 220–240 В, 50–60 Гц


Мощность: 500 Вт

Объём резервуара: 10 л

Вес нетто: 2,3 кг

Вес брутто: 2,9 кг

Материал прибора: ABS-пластик

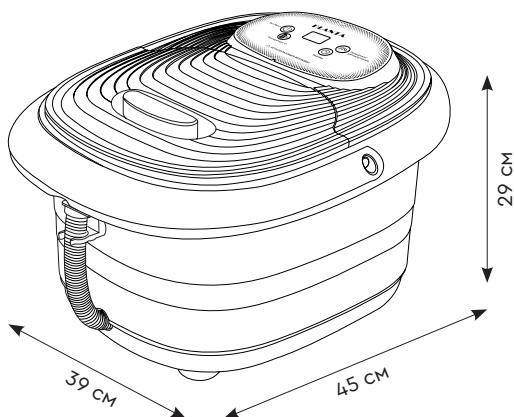

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10%.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

