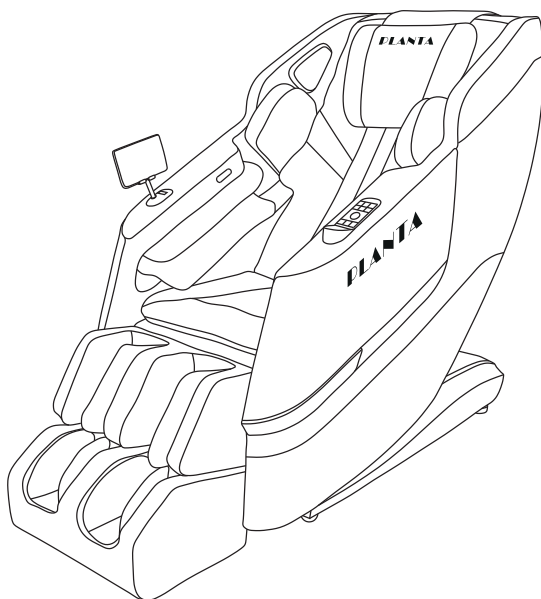


PLANTA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажное кресло

PLANTA MC-7500



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор **массажного кресла PLANTA MC-7500!**

Массажное кресло PLANTA MC-7500 позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло MC-7500 помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабив мышцы плеч, шеи, спины, поясницы, рук, бедер, ягодиц, икр и стоп.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в месте с температурой выше 40 °С, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлено массажное кресло, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание кресла.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не наступайте на массажные ролики, так как это может привести к их поломке.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 30 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

- **Максимальный вес пользователя – 150 кг.**

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание травм спины не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прилагайте к креслу только легкое усилие.

Предупреждения:

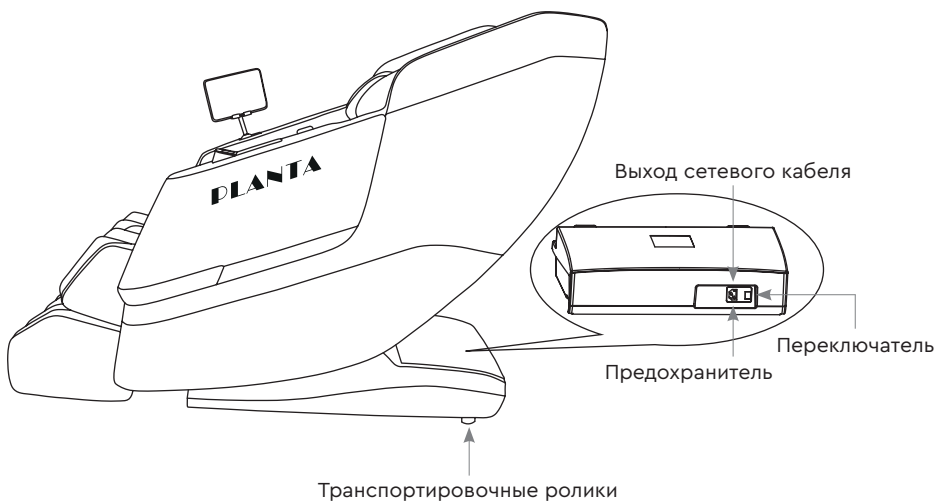
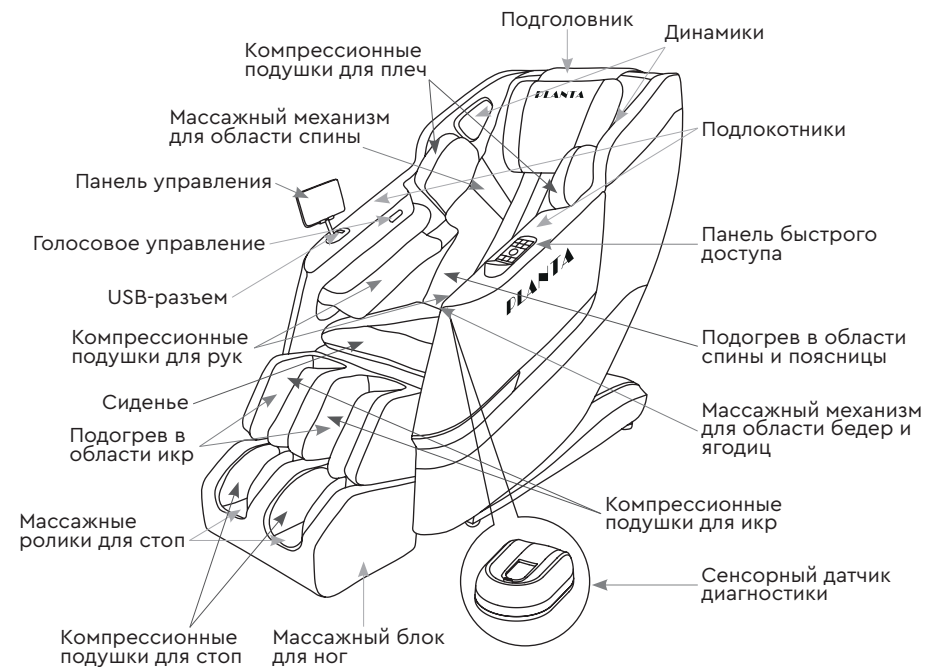
Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, спины и суставов и др.;
- проходите реабилитацию после операции.


Примечание:

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Описание массажного кресла




Панель управления

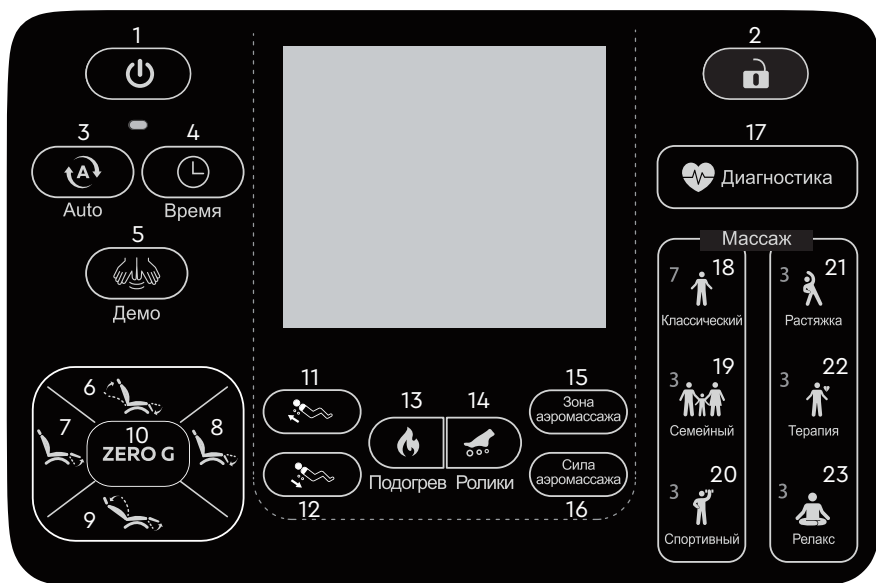


1.  **Включение/выключение работы массажного кресла, активация функции Bluetooth.**


Примечание! Для подключения функции Bluetooth на своем смартфоне выберите в списке допустимых подключений наименование «PLANTA». Функция Bluetooth активируется автоматически при включении массажного кресла.

2.  **Блокировка/Разблокировка.** При нажатии кнопки автоматически блокируются все кнопки, кроме кнопок «Вкл/Выкл», «Пауза» и «Разблокировка».

Для разблокировки кнопок нажмите кнопку повторно.

Примечание! После включения массажного кресла и бездействия в течение 1 минуты происходит автоматическая блокировка кнопок.




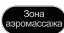



3.  **Auto.** Включение/выключение и выбор одной из 21 автоматической программы массажа тела. Выбрать необходимую программу можно, нажимая на кнопку АВТО до активации нужной автопрограммы (см. «Автоматические программы массажа»). Автопрограммы включают в себя чередование и/или сочетание воздушно-компрессионного и роликового массажа всего тела.

Примечание! В связи с тем, что массажное кресло имеет 22 автоматические программы, включая программу «Демо», при этом программа «Демо» имеет отдельную кнопку на панели управления, кнопка  предусматривает начало выбора автопрограммы, начиная со 2-ой программы классического массажа «Акупунктурный».






Примечание! После выбора автопрограммы начнется автоматическое определение роста и веса тела.

4.  **Время.** Выбор времени массажа (10, 20 или 30 минут). Нажимайте кнопку, пока не выберете необходимое время массажа.
5.  **Демо.** Активация демонстрационного режима массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажмите кнопку, чтобы запустить демонстрационную версию массажа.
6.  **Положение «Сидя».** Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
7.  **Поднятие подставки для ног.** Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень угла наклона подставки для ног. Затем отпустите кнопку.
8.  **Опускание подставки для ног.** Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень угла наклона подставки для ног. Затем отпустите кнопку.
9.  **Положение «Лежа».** Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежачего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
10.  **Невесомость.** Активация данной функции предусматривает приведение кресла в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела. Нажмите кнопку один раз, чтобы привести кресло в положение невесомости. Нажмите повторно, чтобы привести кресло в исходное положение.
11.  **Вверх.** Активация движения массажных роликов в области плеч снизу вверх.

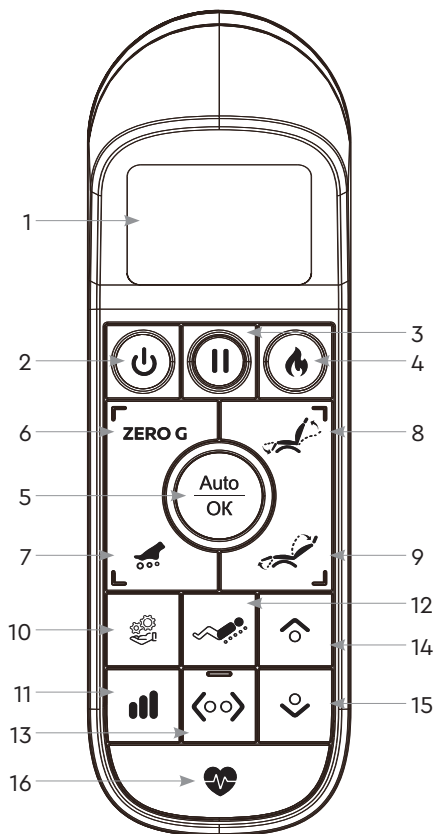
После автоматического определения положения массажных роликов в области плеч Вы можете выбрать другое положение массажных роликов. Нажимайте кнопку для движения роликов вверх от исходного положения до закрепления в нужной области массажа. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.


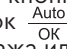
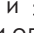

12.  **Вниз.** Активация движения массажных роликов в области плеч сверху вниз.
- После автоматического определения положения массажных роликов в области плеч Вы можете выбрать другое положение массажных роликов. Нажимайте кнопку для движения роликов вниз от исходного положения до закрепления в нужной области массажа. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.
13.  **Подогрев.** Активация подогрева в области спины и икр. Для активации подогрева спины нажмите кнопку один раз. Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.
14.  **Ролики в стопах.** Активация роликового массажа в области стоп. Для активации массажа нажмите кнопку один раз. Для отключения-нажмите кнопку повторно.
15.  **Аэромассаж.** Включение/выключение/выбор зоны воздушно-компрессионного массажа тела.
- Однократное нажатие на кнопку активирует воздушно-компрессионный массаж всего тела (плечи, руки, икры и стопы).
 - Повторное нажатие на кнопку активирует воздушно-компрессионный массаж верхней части тела (руки и плечи).
 - Последующее нажатие на кнопку активирует воздушно-компрессионный массаж нижней части тела (икры и стопы).
 - Последующее нажатие на кнопку отключает воздушно-компрессионный массаж.
16.  **Сила аэромассажа.** Выбор интенсивности воздействия (силы давления) компрессионных массажных подушек выбранной зоны массажа. Предусмотрено 5 уровней интенсивности.
- Нажимайте кнопку, пока не выберете комфортный для Вас уровень интенсивности.
17.  **Диагностика.** Активация диагностики жизненных показателей пользователя, на основе которых кресло подбирает уникальную и оптимальную для вас программу воздействия массажного механизма для правильной проработки наиболее напряженных участков тела (см. «Функция сканирования тела»).
18.  **Классический массаж.** Активация и выбор одного из 7 видов классического массажа (см. «Автоматические программы массажа»). На-


жимайте кнопку пока не выберете необходимый вид массажа.


19.  **Семейный массаж.** Активация и выбор одного из 3 видов семейного массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку пока не выберете необходимый вид массажа.
20.  **Спортивный массаж.** Активация и выбор одного из 3 видов спортивного массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку пока не выберете необходимый вид массажа.
21.  **Растяжка.** Активация и выбор одного из 3 режимов растяжки (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку пока не выберете необходимый режим.
22.  **Терапия.** Активация и выбор одного из 3 видов терапевтического массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку пока не выберете необходимый вид массажа.
23.  **Релакс.** Активация и выбор одного из 3 видов расслабляющего массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку пока не выберете необходимый вид массажа.

Панель быстрого доступа



- 1. LCD-дисплей.** Отображает активную программу и функции работы массажного кресла, а также показатели и рекомендации после проведенной диагностики (см. «Функция сканирования тела»).
- 2.  Вкл/выкл.** Включение/выключение работы массажного кресла, активация функции Bluetooth. После нажатия кнопки кресло перейдет в режим ожидания. Затем с помощью кнопок  и  вы можете выбрать один из 22 видов автоматического массажа или один из 9 видов ручного массажа. Для отключения работы массажного кресла нажмите кнопку повторно.
- 3.  Пауза.** Приостановка активированной программы работы массажного кресла. Для приостановки работы массажного кресла нажмите кнопку один раз. Для возобновления работы нажмите кнопку повторно.



Примечание! Во время приостановки работы массажного кресла активна только кнопка .

4.  **Подогрев.** Активация подогрева в области спины и икр. Для активации подогрева нажмите кнопку один раз. Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.


5.  **Auto/OK.**


- **Auto.** Выбор и активация работы одной из 22 автоматических программ массажа (см. «Автоматические программы массажа»). Нажимайте кнопку, пока на дисплее не отобразится необходимая программа массажа. Выбранная программа начнет свою работу автоматически.


- **OK.** Активация рекомендуемой программы массажа после проведенной диагностики жизненных показателей (см. «Функция сканирования тела»). После завершения диагностики на дисплее отобразится результат сканирования. Нажмите кнопку, чтобы перейти к рекомендуемой программе массажа.


Примечание! В рекомендуемой программе массажа предусмотрено несколько видов массажа. С помощью кнопок  и  выберете один из видов массажа и нажмите кнопку OK для активации работы массажного кресла в заданном режиме.

Примечание! После активации работы любой из 22 автоматических программ или одного из 9 ручных режимов работы массажное кресло переходит в режим автоматического определения роста и веса тела. При этом на дисплее будет отображаться соответствующая информация. По окончании определения роста и веса кресло начнет работу в выбранном режиме.









6.  **Невесомость.** Нажмите кнопку один раз, чтобы привести кресло в положение невесомости. Нажмите кнопку повторно, чтобы привести кресло в исходное положение.



7.  **Ролики в стопах.** Активация роликового массажа в области стоп. Для активации массажа нажмите кнопку один раз. Для отключения – нажмите кнопку повторно.


8.  **Положение «Сидя».** Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.

9.  **Положение «Лежа».** Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежащего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас


уровень наклона. Затем отпустите кнопку.


10.  **Ручной режим.** Выбор и активация работы одного из 9 видов ручного режима массажа (см. «Ручные режимы массажа»). Нажимайте кнопку, пока на дисплее не отобразится необходимый вид массажа. Выбранный режим начнет свою работу автоматически.
11.  **Скорость.** Выбор скорости движения массажных роликов для одного из 9 видов ручного режима массажа (на выбор предусмотрено 5 уровней скорости движения роликов). Нажимайте кнопку, пока не выберете комфортный уровень скорости.
12.  **Позиция.** Выбор и фиксация расположения массажных роликов для одного из 9 видов ручного режима массажа. На выбор предусмотрено 3 варианта расположения:
- **Общий роликовый массаж.** Ролики двигаются вдоль всего тела. Данный вариант активируется по умолчанию.
 - **Выбор области массажа.** После выбора данного варианта ролики начинают двигаться в определённой области массажа, выполняя массажные движения в небольшом диапазоне вверх и вниз от заданной области.
 - **Точечный массаж.** После выбора данного варианта ролики начинают выполнять массажные движения в фиксированной точке. Используйте кнопки  и  для выбора фиксации массажных роликов в определённой точке. Затем отпустите кнопку.
13.  **Область массажа.** Выбор области массажа по ширине для одного из 9 видов ручного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 области – широкая/средняя/узкая). Нажимайте кнопку, пока не выберете нужную ширину области массажа.
14.  **Вверх.** Активация движения массажных роликов снизу вверх. После выбора позиции «Точечный массаж» используйте кнопку для движения роликов вверх. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.
15.  **Вниз.** Активация движения массажных роликов сверху вниз. После выбора позиции «Точечный массаж» используйте кнопку для движения роликов вниз. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.

Примечание! Кнопки  и  также активны для выбора рекомендуемой программы массажа после проведения диагностики жизненных показателей.

16.  **Диагностика.** Активация диагностики жизненных показателей пользователя, на основе которых кресло подбирает уникальную и оптимальную для вас программу воздействия массажного механизма для правильной проработки наиболее напряженных участков тела (см. «Функция сканирования тела»).

Автоматические программы массажа

Массажное кресло предусматривает на выбор 22 автоматические программы. Автопрограммы включают в себя чередование и/или сочетание воздушно-компрессионного и роликового массажа всего тела. Для переключения между автоматическими программами нажимайте кнопку  на панели управления либо кнопку $\frac{\text{Auto}}{\text{OK}}$ на панели быстрого доступа для активации нужной автопрограммы. Также для активации одной из автопрограмм Вы можете воспользоваться голосовым помощником (см. «Функция голосового управления»).


Примечание! Автопрограмма ДЕМО на панели управления имеет отдельную кнопку , в связи с чем переключение автоматических программ на панели управления начинается со 2-ой программы классического массажа «Акупунктурный».

Категория массажа	№	Авто программа	Основные техники массажа	Интенсивность	Закрепленные части тела
Классический	1	Демо	Демонстрационный режим массажа, включающий в себя роликовый массаж, аэромассаж и растяжку всего тела с сокращенной продолжительностью массажа 8 минут.	Средняя	Все тело
	2	Акупунктурный	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания всего тела в сочетании с аэромассажем, сосредоточенный на массаже акупунктурных точек.	Средняя	Все тело
	3	Расслабляющий	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания всего тела в сочетании с аэромассажем и легким покачиванием.	Средняя	Все тело
	4	Ноги и стопы	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания в сочетании с аэромассажем и сосредоточенный на массаже области ягодиц, ног и стоп.	Средняя	Ягодицы, ноги, стопы
	5	Все тело	Классический массаж с пониженной интенсивностью, включающий в себя техники постукивания и разминания в сочетании с мягким аэромассажем всего тела.	Средняя/низкая	Все тело

	6	Оздоров- ливающий	Классический массаж с умеренной интенсивностью, включающий в себя техники постукивания и разминания в сочетании с аэромассажем всего тела.	Средняя	Все тело
	7	Растяжка	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания области спины и поясницы в сочетании с аэромассажем, сосредоточенный на достижении эффекта растяжения позвоночника.	Средняя	Спина и поясница
Семейный	8	Мужчины	Режим массажа с высоким уровнем интенсивности, включающий в себя технику разминающего массажа с акцентом на область поясницы, шеи и плеч в сочетании с аэромассажем всего тела.	Средняя/ высокая	Все тело
	9	Женщины	Режим массажа, включающий в себя техники разминающего и постукивающего массажа с акцентом на область поясницы и бедер в сочетании с аэромассажем всего тела.	Средняя	Все тело
	10	Пожилые люди	Режим массажа с низким уровнем интенсивности, включающий в себя технику разминающего и постукивающего массажа в сочетании с мягким аэромассажем всего тела.	Низкая	Все тело
Спортивный	11	Шея и плечи	Режим массажа, включающий в себя техники разминающего массажа и массажа Шиаци в сочетании с аэромассажем с акцентом на область шеи и плеч.	Средняя	Шея, плечи
	12	Бедра и ягодицы	Режим массажа, включающий в себя техники разминающего и постукивающего массажа с акцентом на область поясницы, бедер и ягодиц в сочетании с аэромассажем области ног и стоп.	Средняя	Поясница, ягодицы, ноги, стопы
	13	Спортивный	Режим массажа с высоким уровнем интенсивности, включающий в себя технику разминания пальцами и постукивающего массажа в сочетании с аэромассажем всего тела.	Высокая	Все тело

Растяжка	14	Вытяжение шейного отдела	Режим массажа, включающий в себя технику разминающего массажа в сочетании с аэромассажем, сосредоточенный на достижении эффекта вытяжения шейного отдела.	Средняя	Шея, плечи
	15	Вытяжение поясницы	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания области поясницы в сочетании с аэромассажем, сосредоточенный на достижении эффекта вытяжения поясничного отдела.	Средняя	Поясница
	16	Вытяжение всего тела	Режим массажа, включающий в себя техники постукивания и разминания в сочетании с аэромассажем, сосредоточенный на достижении эффекта вытяжения всего тела.	Средняя	Все тело
Терапия	17	Шея	Режим массажа с высоким уровнем интенсивности, включающий в себя технику разминающего роликового массажа для снятия напряжения в области шеи и плеч.	Средняя/ высокая	Шея, плечи
	18	Поясница	Режим массажа, включающий в себя техники разминающего и постукивающего массажа в сочетании с аэромассажем для снятия напряжения в области поясницы, бедер и ягодиц.	Средняя	Поясница, ягодицы
	19	Вся спина	Режим массажа со средним и низким уровнем интенсивности, включающий в себя техники разминающего и постукивающего массажа в сочетании с аэромассажем для снятия напряжения во всем теле.	Средняя/ низкая	Спина
Релакс	20	Утренний	Режим массажа со средним и низким уровнем интенсивности, включающий в себя технику постукивающего массажа в сочетании с аэромассажем всего тела.	Средняя/ низкая	Все тело
	21	Дневной	Режим массажа с низким уровнем интенсивности, включающий в себя технику разминающего массажа пальцами в сочетании с мягким аэромассажем всего тела.	Низкая	Все тело
	22	Вечерний	Режим массажа с низким уровнем интенсивности, включающий в себя технику постукивающего массажа в сочетании с мягким аэромассажем всего тела.	Низкая	Все тело

Ручные режимы массажа

Массажное кресло предусматривает на выбор 9 ручных режимов массажа. Ручные режимы предусматривают различные техники роликового массажа и их сочетание между собой. Для переключения между ручными режимами нажимайте кнопку  на панели быстрого доступа для активации нужного режима.

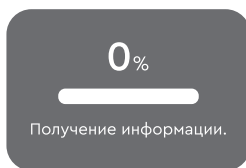
Затем с помощью кнопки  выберите необходимую позицию расположения массажных роликов или оставьте активным общий роликовый массаж.

- 1. Режим «Разминание +».** Данный режим предусматривает активацию разминающего роликового массажа заданной области с движением массажных роликов друг к другу.
- 2. Режим «Надавливание».** Данный режим предусматривает активацию надавливающего роликового массажа заданной области.
- 3. Режим «Разминание + надавливание».** Данный режим предусматривает активацию сочетания техник разминающего и надавливающего роликового массажа заданной области.
- 4. Режим «Роликовый».** Данный режим предусматривает активацию общего роликового массажа заданной области с сочетанием техник разминающего, надавливающего, постукивающего массажа и массажа Шиацу.
- 5. Режим «Постукивающий».** Данный режим предусматривает активацию постукивающего роликового массажа заданной области.
- 6. Режим «Разминание -».** Данный режим предусматривает активацию разминающего роликового массажа заданной области с движением массажных роликов друг от друга.
- 7. Режим «Разминание ладонями».** Данный режим предусматривает активацию разминающего роликового массажа заданной области с имитацией разминания ладонями.
- 8. Режим «Разминание пальцами».** Данный режим предусматривает активацию разминающего роликового массажа заданной области с имитацией разминания пальцами.
- 9. Режим «Ритмичный».** Данный режим предусматривает активацию роликового массажа заданной области с имитацией ритмичного похлопывания.

Функция сканирования тела

Массажное кресло имеет встроенную функцию сканирования тела с помощью встроенного сенсорного датчика диагностики жизненных показателей пользователя, на основе которых кресло подбирает уникальную и оптимальную для вас программу воздействия массажного механизма для правильной проработки наиболее напряженных участков тела.

1. Перед началом сканирования примите удобное положение, расслабьтесь, дышите ровно и старайтесь сохранять неподвижность.
2. Поместите палец на сенсорный датчик диагностики, не прижимая его сильно к датчику.
3. Нажмите кнопку  **Диагностика** на панели управления, кнопку  на панели быстрого доступа либо воспользуйтесь функцией голосового управления. Начнется автоматическое сканирование тела. На дисплее будет отображаться информация о ходе сканирования.



Примечание! При неправильном расположении пальца на дисплее отобразится надпись «Пожалуйста, отрегулируйте положение пальца». Попробуйте изменить положение пальца, сканирование продолжится автоматически.

4. По окончании проведения диагностики на дисплее отобразятся результаты сканирования следующих показателей:
 - **Уровень кислорода в крови**
 - **Пульс**
 - **Усталость**



Примечание! Низкий показатель уровня усталости соответствует фактически низкому уровню усталости.

5. После получения результатов сканирования нажмите кнопку $\frac{\text{Auto}}{\text{OK}}$ на панели быстрого доступа. На дисплее отобразятся рекомендуемые программы массажа.
6. С помощью кнопок \uparrow и \downarrow выберите одну из рекомендуемых программ массажа и нажмите кнопку $\frac{\text{Auto}}{\text{OK}}$ для ее активации.

Примечание! Нажатие кнопки $\frac{\text{Auto}}{\text{OK}}$ во время проведения диагностики отключает функцию сканирования тела.

Важно! Функция сканирования и диагностики жизненных показателей предназначена только для справки и не может использоваться для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Если Вас беспокоят какие-либо отклонения в вашем организме, пожалуйста, обратитесь в медицинскую организацию для проведения профессионального обследования.

Функция голосового управления

Массажное кресло имеет встроенную функцию голосового управления. После включения массажного кресла функция голосового контроля находится в режиме ожидания.

- Для начала управления с помощью голоса активируйте голосового помощника, произнеся фразу:

«Привет, Планта!»

- После распознавания голоса голосовой помощник даст ответ:

«Приветствую Вас! Готова помочь Вам расслабиться и восстановить силы!»


Примечание! Если Вы не услышали ответ голосового помощника, повторите через 2 секунды попытку, произнеся фразу «Привет, Планта!» более громким и четким голосом.

- Функция голосового управления имеет 9 команд для голосового помощника, предусматривающих его ответ, после которого активируется нужная функция или автоматическая программа массажа:

Команды голосового управления	
Произносимая фраза	Ответ голосового помощника
Привет, Планта!	Приветствую Вас! Готова помочь Вам расслабиться и восстановить силы!
Диагностика	Начинаю проверку
Нулевая гравитация	Включаю
Классический	Начинаю массаж
Семейный	Начинаю массаж
Растяжка	Начинаю массаж
Спортивный	Начинаю массаж
Терапия	Начинаю массаж
Релакс	Начинаю массаж

- Каждая категория массажа включает в себя несколько автоматических программ (см. «Автоматические программы массажа»). Для переключения между ними повторяйте произносить название данной категории пока на дисплее не отобразится название нужной автоматической программы.
- Затем голосовой помощник произнесет ответ на фразу и нужная функция или автопрограмма запустится автоматически.
- Если после активации функции голосового контроля прошло более 8 секунд, голосовой помощник произнесет фразу **«Выход из режима управления голосом»**, и функция голосового управления будет отключена.

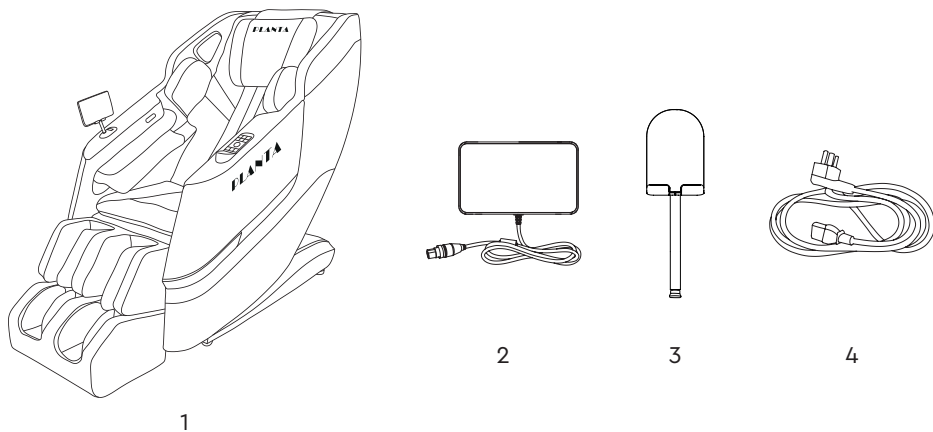
Комплектация массажного кресла



1. Массажное кресло
2. Панель управления
3. Кронштейн для панели управления
4. Сетевой кабель

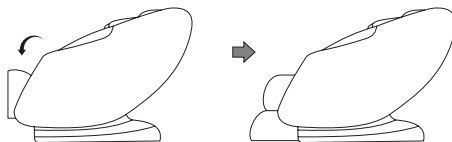
*Массажное кресло поставляется полностью в собранном виде
и не требует дополнительной сборки.*

Эксплуатация массажного кресла


 Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

- Извлеките из коробки массажное кресло. Удалите все упаковочные материалы.
- Внимательно осмотрите массажное кресло на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.


1. Осмотрите массажное кресло.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений на кресле и шнуре питания.
3. Опустите подставку для ног:



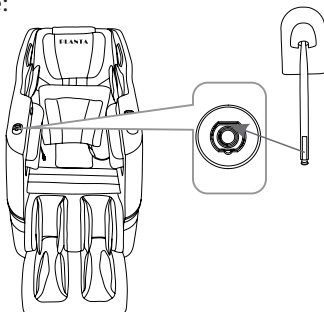
4. Вставьте кронштейн для панели управления в отверстие для кронштейна на правом подлокотнике:



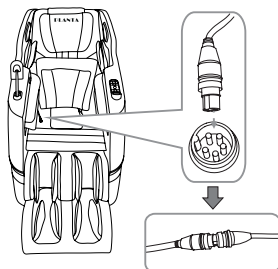
5. Соедините штекер на панели управления с проводом панели управления, выходящим из правой стороны сиденья и затяните гайку:



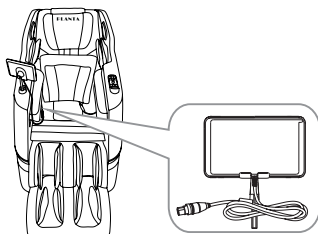6. Установите панель управления на кронштейн:




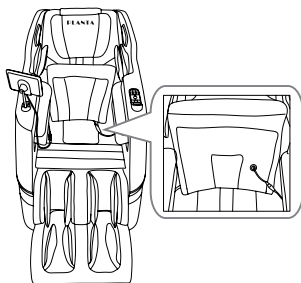7. Соедините провод подогрева с проводом под накидкой, расположенной на спинке кресла:




8. Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его раскладывания:

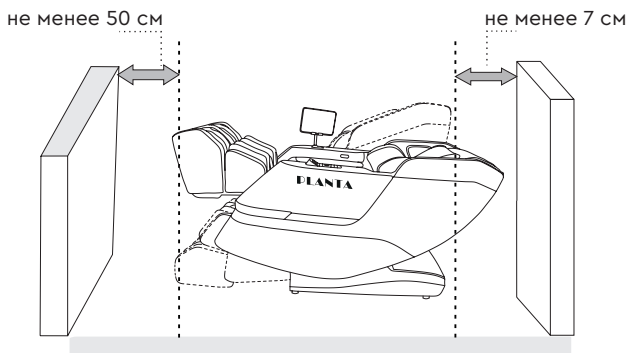- **не менее 7 см позади кресла;**
- **не менее 50 см перед креслом.**






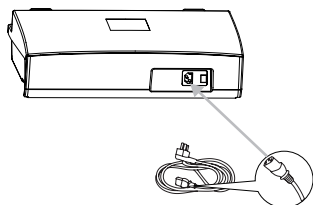Примечание! В массажном кресле предусмотрена функция экономии пространства, в связи с чем пространство позади кресла минимальное – 7 см.



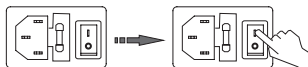9. Убедитесь, что под креслом нет посторонних предметов.
10. Подсоедините сетевой провод к разъему в нижнем углу задней части спинки кресла и подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.


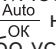





11. Нажмите переключатель в положение «ВКЛ» в нижнем углу задней части спинки кресла.








12. Нажмите кнопку  на панели управления или кнопку  на панели быстрого доступа для включения устройства. Массажное кресло перейдет в режим ожидания.

13. При желании с помощью кнопки  на панели управления, кнопки  на панели быстрого доступа либо с помощью голосового помощника проведите диагностику жизненных показателей (см. «Функция сканирования тела»), после чего устройство предложит рекомендуемые программы массажа, и Вы сможете выбрать и активировать любую из них.


14. Выберите нужную программу автоматического массажа с помощью кнопки  на панели управления, кнопки  на панели быстрого доступа или с помощью голосового помощника либо установите ручной режим работы с помощью кнопки  на панели быстрого доступа.


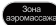






15. После автоматического определения роста и веса тела и автоматической установки положения массажных роликов в области плеч при необходимости с помощью кнопок  и  выберите более комфортное положение массажных роликов.


16. После выбора ручного режима массажа с помощью кнопок ,  и  выберите комфортную позицию, область расположения массажных роликов по ширине, а также скорость их движения.

17. При выборе позиции «Точечный массаж» с помощью кнопок  и  выберите фиксированную область массажа и зафиксируйте ее.

18. С помощью кнопок , , ,  выберите комфортный для

Вас уровень положения спинки и подставки для ног или с помощью кнопки  активируйте функцию «Невесомость».

19. С помощью кнопки  выберите необходимое время массажа (10, 20 или 30 минут).
20. С помощью кнопки  Вы можете активировать необходимую зону аэро-массажа вручную.
21. С помощью кнопки  отрегулируйте комфортную интенсивность (силу давления) аэромассажа.
22. С помощью кнопки  на панели управления либо кнопки  на панели быстрого доступа активируйте роликовый массаж стоп.
23. При желании Вы можете активировать функцию подогрева спины и икр, нажав кнопку . Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.
24. С помощью кнопки  Вы можете приостановить работу активной программы массажа. Для возобновления работы нажмите кнопку повторно.
25. Нажатие на кнопку  во время работы массажного кресла прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло.
26. По завершении массажа выключите прибор из розетки.

 **ВНИМАНИЕ!** При использовании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат под креслом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на кресло.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 30 минут. Полезное действие массажа составляет 30 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Внимание!

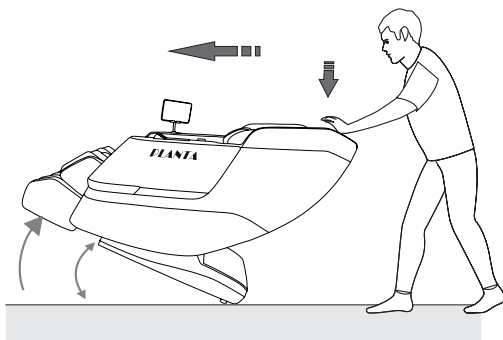
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства

должны выполнять только уполномоченные представители производителя.

- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

Перемещение кресла

Перед перемещением массажного кресла убедитесь, что кнопка питания находится в положении Выкл, провод питания отсоединен. Возьмитесь за углубление в задней спинке кресла двумя руками, слегка наклоните его на себя и переместите кресло на нужное место, используя транспортировочные ролики.





Уход и хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажное кресло в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажного кресла.

 **Предупреждение: перед очисткой или обслуживанием массажного кресла обязательно отключите вилку питания.**

1. Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
2. Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу остыть.
3. Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
4. Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.

 **Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду. Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.**

 **Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.**

5. Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
6. Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
7. Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
8. Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
9. Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 30 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Слышен громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажного механизма	Это нормальная ситуация при работе массажера

Технические характеристики

Модель: **MC-7500**

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 150 Вт

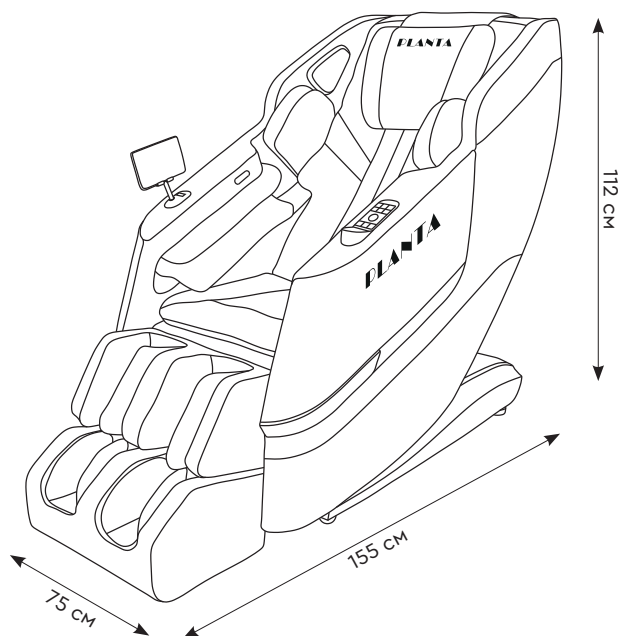
Размеры в сложенном виде: 155 x 75 x 112 см

Размеры в разложенном виде: 183 x 75 x 83 см


Вес нетто: 84,4 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер

Цвет: бежевый



Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p>
<p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: ШАНЬДУН КАНГТАЙ ИНТЕЛЛИЖЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.»</p>	<p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: №389 Цзиньчэн-роуд, Чжаоюань, Шаньдун, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32</p> <p>Сделано в Китае</p> <p>класс защиты I </p>	<p>М.П.</p>